



MultiCoder

Primer y único sistema para impresión semiautomática de materiales de laboratorio



Profesionalice su laboratorio con un etiquetado fácil y rápido de las muestras



La trazabilidad de los procesos es de crucial importancia en los laboratorios modernos. Ahora, la identificación de las muestras, contenedores y otros equipos, es un proceso fácil gracias al innovador sistema de impresión de Minitube, la **impresora de laboratorio MultiCoder!**

VERSÁTIL

- Puede rotular un amplio rango de productos, tales como pajuelas de semen, goblets y mucho más
- La impresión se puede realizar en diversos materiales, como plásticos, vidrio o aluminio
- Los soportes estándar y personalizados para los diferentes productos permiten innumerables aplicaciones

PROFESIONAL


- Identificación clara de las muestras legibles por máquina: no más errores o confusiones
- Lectura fácil incluso espacios de impresión pequeños, incluyendo texto, códigos de barras, códigos QR y logotipos
- Tinta duradera, se seca inmediatamente después de la impresión
- La impresión soporta condiciones extremas como el nitrógeno líquido

RÁPIDO & FÁCIL

- Flujo de trabajo perfecto y semiautomático: mucho más rápido que el rotulado manual
- El soporte movable manualmente, un sistema único y fácil de usar que garantizan un proceso de trabajo rápido
- Cambio rápido y fácil de los soportes sin necesidad de herramientas
- Software intuitivo que facilita el proceso de impresión
- Diseños listos para imprimir gracias a la creación automática de contenido a través de la base de datos
- Impresión individual mediante diseño digital y visualización
- Funcionamiento simple incluso para personal no capacitado

ECONÓMICO

- Diseño resistente al desgaste y cartucho de tinta de larga duración para costes bajos de operación
- Instalación y limpieza rápida y fácil
- Sin mantenimiento
- Dispositivo móvil compacto que ahorra espacio

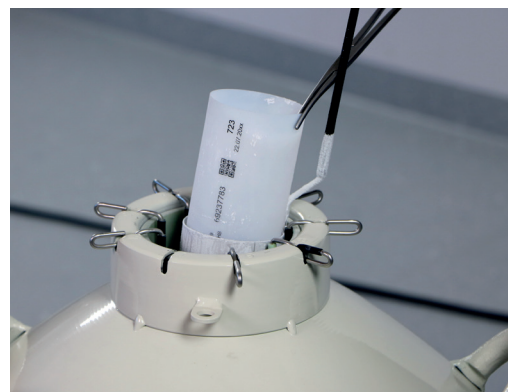

name	type	size	id number	purchase date	expiration date	status	quantity per position	verification date	status	expiration date
AM2079	15664HB	V10	69237783	21.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2080	1567ACIL	V10	69238102	26.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2081	15667AB	V10	69238040	19.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2082	15668AE	V10	69238008	20.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015
AM2083	15673ABD	V10	69238008	20.08.2014	23.01.2015	1	2000	1	1	23.04.2015

Características del producto

- Impresión de tinta de alta resolución
- Sistema de protección del cabezal de impresión (evita que se seque la tinta)
- La técnica de impresión por sensores permite un flujo de trabajo perfecto
- Indicador LED del estado de la impresora
- No requiere herramientas para el cambio de adaptadores del producto
- Posibilidad de cargas de formatos de datos MS Excel
- Diseños de impresión predefinidos
- Creación automática de contenidos para diseños de impresión vía base de datos
- Es posible la instalación de software en el servidor central para acceso remoto y compartir diseños




Impresora MultiCoder

REF. : 13145/0000

Accesorio

Cartucho de tinta para MultiCoder

REF. : 13145/0010

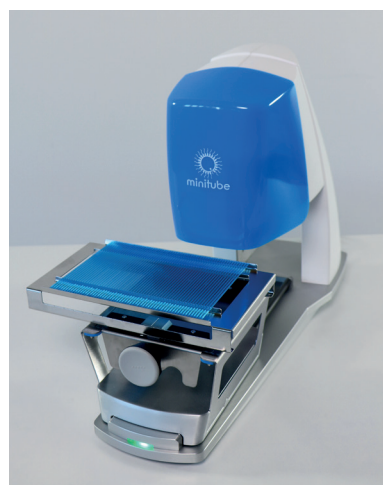

**Innumerables posibilidades de aplicación -
¿cuál es la suya?**



Visión general adaptadores

Producto	Adaptador	Accesorios requeridos	Soporte requerido
Goblet, redondo, 35 mm	REF.: 13145/0100	- ninguno -	- ninguno -
Goblet, redondo, 65 mm	REF.: 13145/0101	- ninguno -	- ninguno -
Goblet, hexagonal	REF.: 13145/0102	- ninguno -	- ninguno -
Placa de identificación (para raqueta de goblet)	5 placas/ciclo REF.: 13145/0103	- ninguno -	- ninguno -
Cassette plano	REF.: 13145/0110	- ninguno -	- ninguno -
Placa de Petri	REF.: 13145/0300	- ninguno -	- ninguno -
Goblet, redondo, 7,1 mm	Multi-impresión 20x, 1 goblet/ciclo REF.: 13145/0219	- ninguno -	Soporte para adaptadores de multi-impresión REF.: 13145/0200
Goblet, redondo, 10 mm	Multi-impresión 15x, 1 goblet/ciclo REF.: 13145/0220	- ninguno -	
Goblet, redondo, 13 mm	Multi-impresión 12x, 1 goblet/ciclo REF.: 13145/0221	- ninguno -	
Pajuelas de semen, 0.25 ml	Multi-impresión, 60x, 4 pajuelas/ciclo REF.: 13145/0201	Bloque para carga de adaptador de pajuelas de 0,25 ml REF.: 13145/0230	
Pajuelas de semen, 0.5 ml	Multi-impresión, 36x, 3 pajuelas/ciclo REF.: 13145/0202	Bloque para carga de adaptador de pajuelas de 0,5 ml REF.: 13145/0231	
Pajuelas de semen sobre rampas para congelador IceCube (16821/5036)	Multi-impresión, 36x, 3 pajuelas/ciclo, adaptador IceCube rampa de congelación REF.: 13145/0210	Requiere de racks para IceCube y bloque de carga apropiado	

Se pueden diseñar adaptadores personalizados bajo pedido