



Aspiración de ovocitos



Soluciones Minitub para una colección exitosa de ovocitos

Porta-sonda de ultrasonido

- Diseño delgado permite la aspiración de ovocitos en hembras jóvenes (especialmente en combinación con una sonda pequeña)
- Salida optimizada para agujas recomendadas (23360/1200 y 23360/1250)
- Sin riesgo de desprendimiento de la aguja
- El material se calienta muy rápidamente a la temperatura corporal
- Porta-sonda muy ligero y suave, fácil de manejar
- Incluye dispositivo para aguja y maletín de transporte


El soporte de sonda está disponible para calzar con GE, SonoSite, Aloka, BCF, o sonda ECM. Bajo pedido también se puede adaptar el dispositivo a otras sondas.

GE	REF.: 23400/0120
SonoSite	REF.: 23400/0040
Aloka	REF.: 23360/0600
BCF	REF.: 23400/0115
ECM	REF.: 23400/0413



La unidad de aguja consiste en:

- Tuerca de sujeción para la fijación segura de la aguja (1): proporciona una fijación segura de la aguja en su posición, no permitiendo ningún espacio muerto entre la aguja y el adaptador
- El adaptador de la aguja (2): conecta la aguja con el tubo
- Tubo de conexión de acero inoxidable (3)
- Los mangos de forma redonda (4): permiten un posicionamiento variable de la punta biselada de la aguja

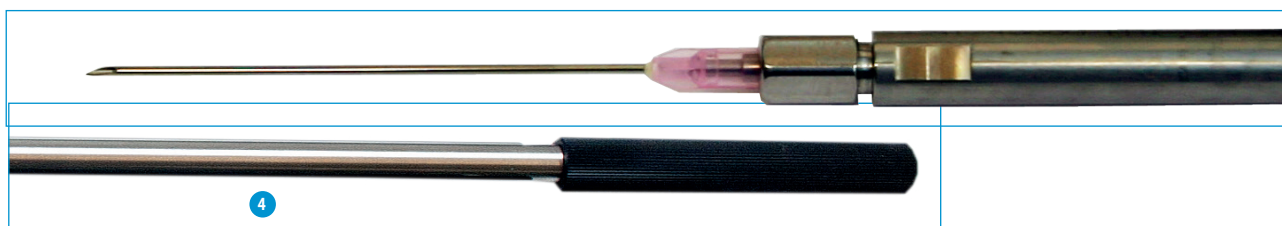



Aguja de aspiración desechable

- Fácil y económica de reemplazar
- Aguja nueva para cada sesión de OPU $\Rightarrow$ alto estándar higiénico
- Corta y fácil de manipular
- 100 agujas / empaque

Para vacas (1,2 x 75 mm), bisel largo REF.: [23360/1200](#)

Para vacas (1,2 x 70 mm), bisel corto REF.: [23360/1300](#)

Para vaquillas (0,9 x 70 mm), bisel largo REF.: [23360/1200](#)


Para vaquillas (0,9 x 70 mm), bisel corto REF.: [23360/1350](#)



Set de mangueras

- Tubo de material firme
- El complejo ovocito-cumulus no se adhiere a las paredes
- Con luer-lock para una conexión a prueba de fugas con el tapón de goma
- Esterilizado y envasado individualmente

Set de mangueras REF.: [23360/1000](#)

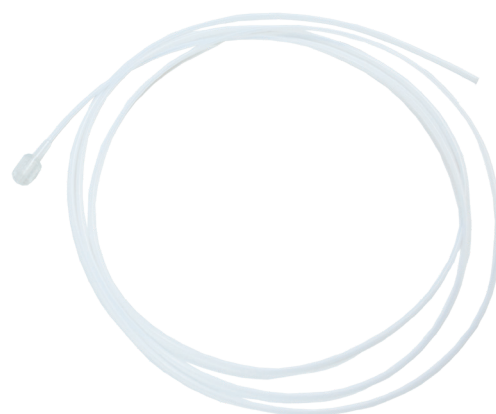

Otros accesorios

Protección para portasondas, desechable,

144 unidades/bolsa REF.: [23360/1260](#)

Gel para examen ultrasónico, 250 g REF.: [23400/0500](#)

Medio de recuperación para OPU REF.: [19982/1281](#)

Bomba de aspiración OPU

- Con calentador de medios
- Transferencia de vacío a la aguja extremadamente rápido
- Operada mediante pedal
- Aspiración ajustable hasta -375 mm Hg
- Temperatura de calentamiento ajustable hasta +50°C

Bomba de aspiración, 230 V REF.: [23362/0000](#)

Bomba de aspiración, 115 V REF.: [23362/0001](#)



Accesorios

Tapón de goma - para la conexión con tubos de 50 ml,

1/empaque REF.: [23360/1100](#)

Tubo de colección, 50 ml REF.: [17220/0017](#)

Tubo de aspiración, 1 conexión Luer macho REF.: [23362/1002](#)

Tubo de aspiración, 2 conexión Luer macho REF.: [23362/1003](#)

Botella con cuello estrecho, 500 ml REF.: [5023362/0500](#)

